

24K
Gold



取扱説明書

(保証書付)

このたびは低周波電動美顔器・治療器 REIGO MODEL 20-LP をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、指示に従って正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご利用される方や周りの方への危害や損害を未然に防止するためのものです。

■注意事項■

- ・必ず裏面の「ご使用方法」をお読みください。
- ・本製品は本説明書以外の他の部位にはご使用にならないでください。
- ・皮膚が敏感な方、過度の日焼け、吹き出物、かぶれなどお肌にトラブルがある方はご使用にならないでください。
- ・付属 REIGO 仕様用ローションはご使用前に腕の内側などに少量塗布し、24 時間様子をみてお肌に異常が無いことを確認してからご使用ください。異常を生じた方は普段お使いのローションに変えてお使いください。
- ・気分が悪くなったり部位に赤味、腫れ、かゆみなどの異常があらわれた場合は、ただちにご使用を中止し皮膚科など専門医にご相談ください。
- ・本製品の分解、改造はしないでください。故障の原因になります。
- ・幼児や小さなお子様の手に届かない場所に保管してください。
- ・高温多湿の場所での保管、および、ほこりや油などの多い場所でのご使用、保管はお避けください。
- ・製品に重いものを乗せたり落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。

使用上のご注意

■以下の点に注意してご使用ください。

- ・24 金ヘッドの表面は効果に大切な部位です。ご使用後は傷つけないように、ヘッドを上に向けて保管してください。
- ・コンタクトを使用されている方は、コンタクトを外してご使用ください。
- ・妊娠中、授乳中の方、金属アレルギーの方はご使用を控えてください。
- ・ペースメーカーなど生命維持関係の器具を装着されている方はご使用しないでください。また、同様の装置をご使用されている方は医師にご相談ください。
- ・インプラントなど身体に金属が入っている方はご使用しないでください。
- ・本製品には防水が施されていません。濡れた手で扱ったり水に浸したり湯船の中でご使用されますと水分が内部に入り込むなど、故障の原因になる場合があります。濡らしてしまった場合は、乾いた布で良く拭いて水分を取り除いて保管してください。
- ・他の方が REIGO を持ち、ご自分では届かない部位を施術することができますが、お2人の体の一部が触れていないとお二人の間を DMC が流れず、効果を得られませんのでご注意ください。

本機の特長

「24K ヘッド」

- ・導子に 24 金のメッキが施されています。

純度の高い金は人間の体内に流れている生体電流とよく似た微弱電流が流れています。この金の持つ微弱電流により新陳代謝を上げ、肌細胞の活性化を促します。また、殺菌・消炎効果により、肌などのトラブルの改善も期待できます。

「DMC」

- ・先端の導子からは当社独自開発の低周波の微動電流「ディープ・マイクロ・カレント (DMC)」が自動的に出力されます。

低周波の DMC が施術部位（患部）の不均衡になっているマイナスイオンとプラスイオンのバランスを平衡に戻します。

「バイブレーション」

- ・毎分 6,000 回転による振動モーターにより、バイブレーション（微振動）が発生します。物理的な振動を与えることにより REIGO 仕様用ローションの浸透を促し、高い保湿効果が期待できます。

「オフ タイマー」


- ・スイッチは 10 分で自動的に切れます。過度な施術や切り忘れの心配がありません。

「充電時間と使用回数」

- ・充電は 5 時間でフル充電になります。使用回数は 1 回約 4 分で約 50 回ご使用になれます。

各部の名称


〈本 体〉

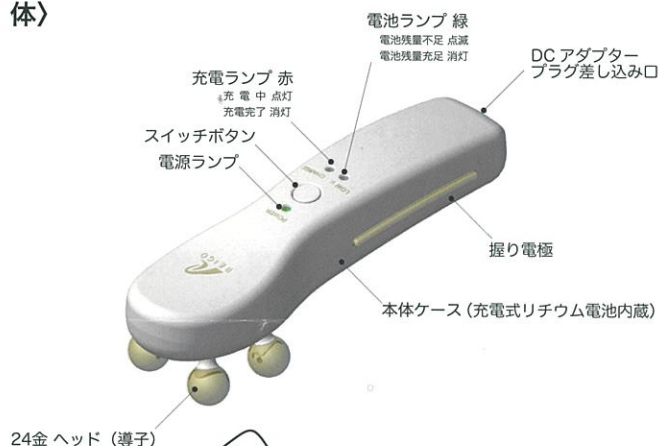

〈REIGO 仕様用ローション〉




〈特製ポーチ〉

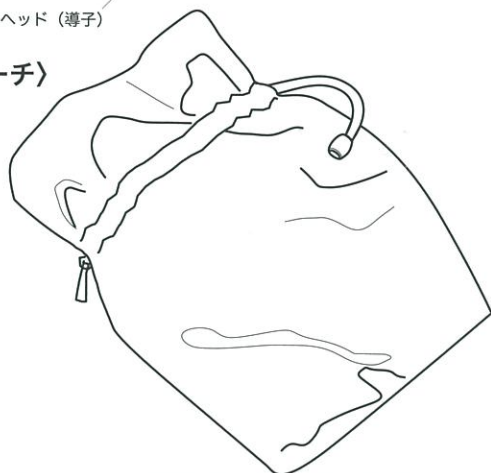

〈充電用 DC アダプター〉



〈取扱説明書（本書）〉

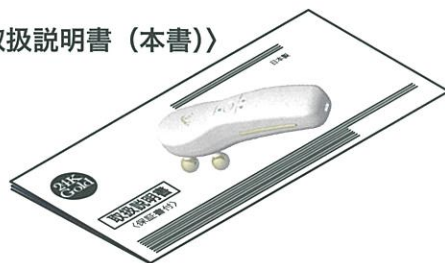

REIGOの扱い方

作動させる


〈スイッチを入れる〉

スイッチボタンを押し
「POWERランプ」の点灯
を確認する
低周波出力とバイブレ
ーションが始まる


停止させる

〈スイッチを切る〉

スイッチボタンを押し
「POWERランプ」の消灯
を確認する
低周波出力とバイブレ
ーションが止まる

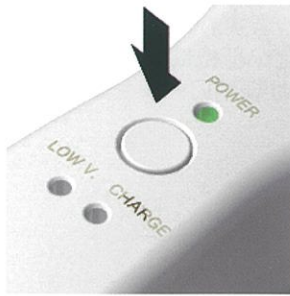

電池の充電

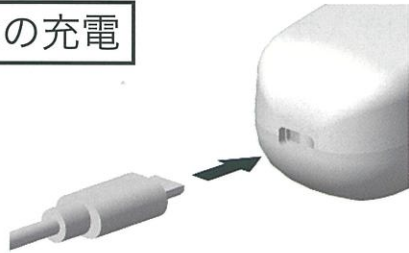

付属の DC アダプターのプラグをしっかりと差し込み
「CHARGE ランプ」の点灯を確認する

充電が完了するとランプは消灯するのでプラグを丁寧に抜く
充電中でも使用は可能

ご使用後の保管

24 金ヘッドを傷つけないようにヘッドを上に向けて保管して
ください。

REIGOのご使用方法-1

〈持ち方〉




握り電極に指が触れる様に
握ってください。

・お顔、その他のお体の部位にもお使いいただけます。

〈お顔のお手入れ〉

- ・手の平に適量の REIGO 仕様用ローションを取り、お手入れする箇所に目や口に入らないよう注意して塗布してください。
目や口に入った時は速やかに洗い流すか、ウガイなどをしてください。
- ・電極が触れる様に (左図参照) REIGO を持ち、4つの 24K ヘッドを REIGO 仕様用ローションを塗布した箇所にヘッドをこすりつけず 15~20 秒程軽く押すように当ててください。
- ・下図のエリアを参考に顔半分を 2~4 分程を目安に行ってください。
- ・終わりましたらスイッチを切ります。


① 顔全体

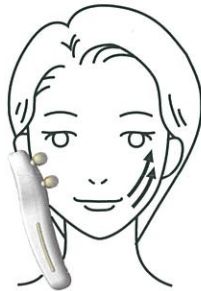

② 目元




③ 小鼻

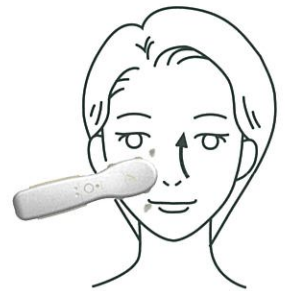

④ 頬




⑤ 目元

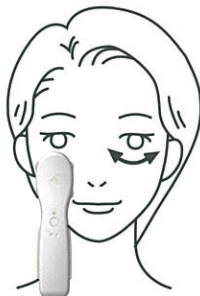


⑥ 眉の下



⑦ ほうれい線

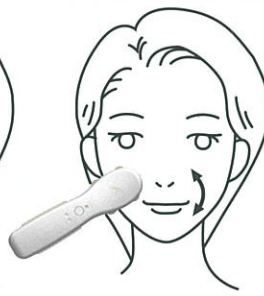

⑧ リフトアップ

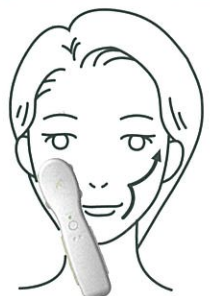

- ・水分が本体内部に入り込むと故障の原因になります。
濡らしてしまった場合は、乾いた布で良く拭いて水分を取り除いてください。

REIGOのご使用方法 -2


〈お体のお手入れ〉

- ・人体の筋肉は基本的に丸形で、キュウリのように棒状になっています。
この両端と中間がコリ状となった範囲をとらえて施術します。
- ・手の平に適量の REIGO 仕様用ローションを取り、使いたい部位に注意して塗布してください。
- ・必ず握り電極が手に触れるように握り、塗布した REIGO 仕様用ローションの範囲に 4 つの 24K ヘッドを滑らすように当ててください。力は必要ありません。
- ・一つの部位に 2~4 分を目安に行ってください。
- ・終わりましたらスイッチを切ります。

① 首すじ



② 肩

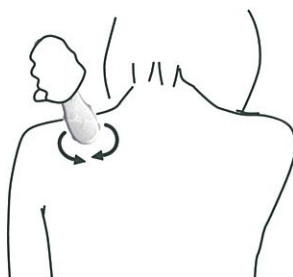


③ 下腹部




・へその下 10 cm を左右に動かす


④ 腰

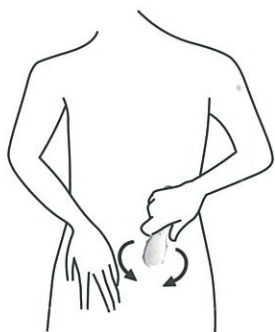

⑤ ひざ・ふくらはぎ

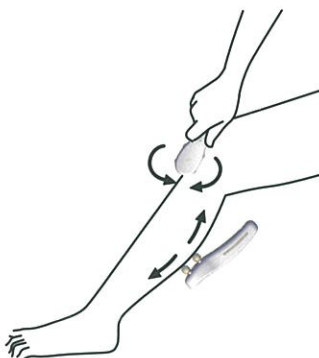

⑥ 股関節

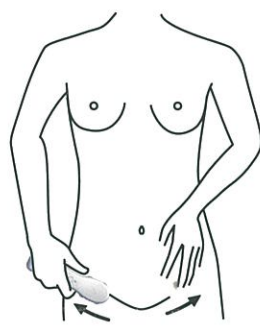


・股関節に当てる


⑦ ひじ



⑧ 胸（気管）

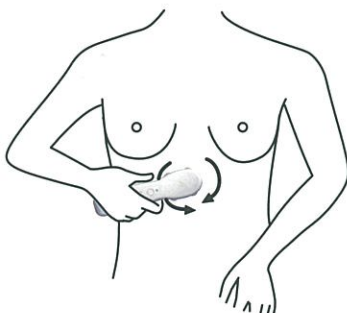


⑨ バストアップ

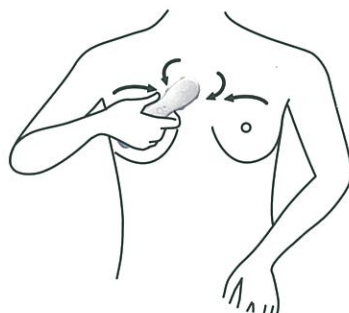

・肋骨周囲／左右肋骨の間に当てる

定格・仕様

品名 / 品番	REIGO 20-LP
電 源	充電式リチウム電池 (3.7V 430mA)
DMC	丸秘
振動数	6,000 回転/分
重 さ	130g
材 質	黄銅 C3604 (金メッキ) ABS
付属品	REIGO仕様用ローション 充電用 DC アダプター 特製ポーチ 取扱説明書

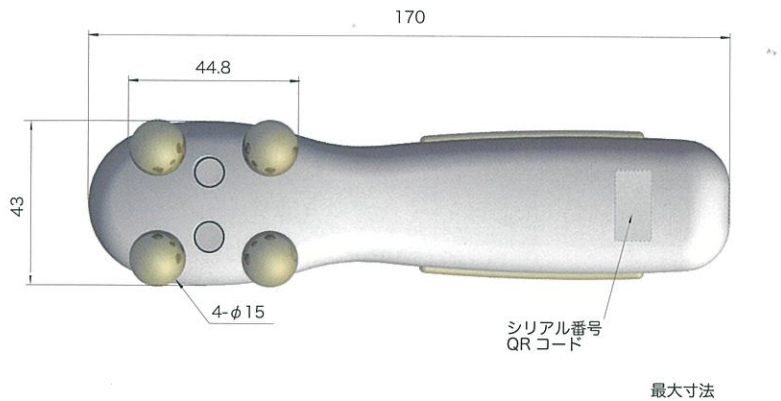

故障かなと思ったら

症 状	原 因	対 処
振動が弱くなった あるいは振動しない	スイッチが正しく押されていない	「POWER」ランプ 赤の点灯を確認し スイッチボタンを押し直す
	電池の容量が少なくなった	「LOWV.」ランプ 緑が点滅している場合 付属の DC アダプターで「CHARGE」ランプ 赤が 消灯するまで充電する 充電中は「CHARGE」ランプは点灯
	電池の容量が無くなった	「POWER」ランプ 緑が消灯している場合 付属の DC アダプターで「CHARGE」ランプ 赤が 消灯するまで充電する

- 上記の対処を施しても症状が改善されない場合やそれ以外の不具合は、保証書をご確認いただき、お買い上げいただいた店舗が保証書下記まで本体貼付の QR コードのシリアル番号とともにご連絡ください。
- 尚、本体貼付の QR コードの読み取りで弊社ホームページにアクセスできますので、ご質問などにご利用いただきますとスムーズに行なえます。

-----〈キリトリ線〉-----

保証規定

- 当製品の保証書有効期限はご購入後 1 年間です。
- 取扱説明書のご使用方法で故障した場合、
無償修理いたします。
但し、製品の往復の送料はお客様の負担とさせていただきます。
- 下記に該当する場合は、保証期間中であっても
有償修理とさせていただきます。
 - 取扱いの過誤による不良。
 - 分解、改造、不当な修理による不良。
 - 天変地異など不可抗力による故障、損傷。
 - 故障、不良原因が当製品以外に起因する場合。
 - ご使用中に生じた表面上の汚れや傷。
 - 保証書のご提示が無い場合。
 - 保証書項目に未記載、改竄が有る場合。
- 本保証書の再発行はいたしません。
- 本保証書は日本国内のみで有効です。

REIGO 保証書

R-00058

品番 20-P		保証期間 本体ご購入より 1 年間	
ご購入者	お名前 (印)		
	ご住所		
販売店	お電話		
	年 月 日		

株式会社 REI 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-30-14 TEL 0120-508-491

製 造 元 株式会社 渡久クリエイト

開発協力 株式会社 メダリスト・ジャパン 〒108-0075 東京都港区港南 2-16-8-1104